



Stomickou podložku uchovávejte ve vodorovné poloze.

**Způsob použití**


**Příprava**

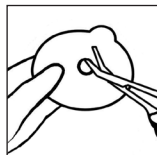


Vystříhnete v podložce otvor přesné velikosti a tvaru stomie pomocí malých zahnutých nůžek a stříhací šablony na podložce. Můžete používat přiloženou stomickou šablonu pro měření velikosti a tvaru stomie. Důležitá je přesná shoda velikosti otvoru a stomie, aby se snížilo riziko netěsnosti a kožních problémů.

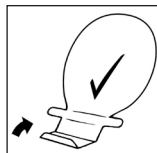

Umístěte sáček na rovný povrch otočený lepícím materiálem směrem dolů. Zavřete výpust trojnásobným složením spodní části výpustě nahoru tak, aby byl viditelný suchý zip Velcro®.

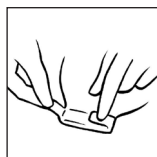

Přeložte obě chlopně dovnitř a zajistěte suchý zip Velcro®.

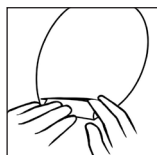

Výpustný otvor lze ukryt pod netkanou textilií.




Důkladně stomii a okolní kůži očistěte. Kůže musí být před aplikací podložky zcela suchá.


**Aplikace**



Sejměte ochrannou fólii z lepícího materiálu na podložce.

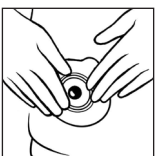

Srovnejte podložku kolem stomie a zatlačte na podložku, abyste zajistili rychlé přilepení a perfektní přilnutí lepícího materiálu ke kůži kolem stomie. Lepicí materiál musí přesně padnout kolem stomie. Aby nedocházelo k podtékání, je důležité zajistit těsné přilnutí lepícího materiálu kolem stomie. Při nalepování podložky/sáčku přitlačte lepící materiál na břicho nejprve v oblasti kolem stomie. Přejeďte prsty po lepícím materiálu kolem celé stomie, abyste se ujistili o přilnutí lepící podložky. Lepicí podložku uhladte počínaje od stomie směrem k vnějším okrajům, abyste se ujistili, že je zcela v kontaktu s pokožkou.

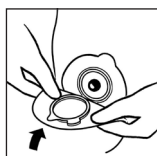

Podložka musí být suchá a čistá (podložku čistěte výhradně vodou). Ujistěte se, že je upínací kroužek otevřený. Položte spodní hranu upínacího kroužku na sáčku na spodní hranu kroužku na podložce.

Dvoudílný výpustný stomický sáček

Stomická podložka

Péče o stomii



**Návod k použití**

23325472 Version 1 Coloplast logo je registrovaná ochranná známka společnosti Coloplast A/S. Všechna práva vyhrazena. © 2021-01-13 Velcro® vlastní společnost Velcro Industries B.V

**Určený účel**

Stomický sáček je určen k pasivnímu sběru výměšků ze stomie. Lepicí stomická podložka je upevněna ke stomickému sáčku a je určena k přilepení k nedotčené kůži kolem stomie.

**Indikace**

Prostředek je indikován pro stomiky.

**Varování**

Opětovné použití produktu na jedno použití se nedoporučuje, protože může dojít ke křížové kontaminaci.

Opětovné zpracování, čištění, dezinfekce a/nebo (opětovná) sterilizace mohou narušit charakteristiky produktu, které pak mohou představovat další riziko fyzického poškození nebo infekce uživatele.

**Upozornění**

Než začnete používat konvexní produkt, poraďte se se svým zdravotnickým pracovníkem o náležitém způsobu používání.

Tento nesterilní produkt obsahuje suroviny přírodního původu a existuje určité riziko, že tyto materiály mohou přenášet patogeny, které nelze zcela odstranit ani sebestříšnějšími výrobními postupy.

Proto je produkt u zranitelných skupin pacientů spojen se zvýšeným rizikem infekce a musí se používat obezřetně u malých dětí a kojenců, kteří ještě nemají plně vyvinutý imunitní systém, a u kojenců léčených imunosupresivou.


**Informace**

Stomický sáček na jedno použití.

Produkty jsou určeny k uložení v krabici až do vyjmutí před použitím, protože je krabice chrání a nálepka na krabici obsahuje důležité informace, jako je číslo šarže, datum spotřeby a jedinečný čárový kód.

Tuto pomůcku není nutné odstranit při vyšetření magnetickou rezonancí, jelikož je při magnetické rezonanci bezpečná.

Coloplast nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoliv poškození nebo jinou ztrátu, které by mohly vzniknout, pokud se výrobek používá způsobem, který je v rozporu s platnými doporučeními společnosti Coloplast.

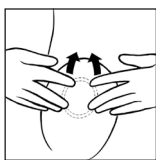


Pomocí prostředníků přitiskněte dole sáček a stomickou podložku k sobě.



Zavřete upínací kroužek stisknutím pojistky na zámečku. Jakmile uslyšíte cvaknutí, sáček je bezpečně připojen k podložce.

#### Vyprázdnění sáčku

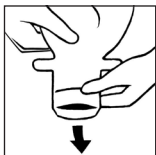

Otevřete výpust a dle potřeby vyprázdněte sáček do toalety.




Očistěte výpust, například toaletním papírem. Složte a znovu zajistěte výpust poté, co jste vyprázdnili sáček.

#### Odstraňování



Sáček odejměte tak, že stisknutím malé chlopně špičkou prstu otevřete upínací kroužek.

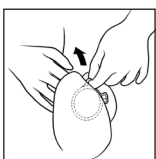

Držte ho za poutko a odstraňte sáček opatrným tažením sáčku směrem od podložky.




Opatrně odstraňte podložku zatažením za poutko na podložce směrem od břicha a srolujte podložku pomalu směrem dolů. Volnou rukou mírně přitlačte na kůži kolem stomie, čímž usnadníte odstraňování.

#### Likvidace

Produkt je určený pouze pro jednorázové použití a je třeba ho zlikvidovat podle místních předpisů, např. s normálním domácím odpadem.

Výrobek nesplachujte do toalety.

#### Štítek filtru

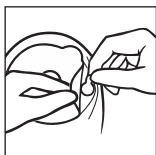

Pokud je třeba zabránit úniku plynu, umístěte jeden z přiložených štítků filtru na filtr.

#### Ohlašování nežádoucích příhod

Pokud došlo během používání nebo v důsledku používání tohoto prostředku k závažné nežádoucí příhodě, ohlaste to prosím výrobci a vašemu státnímu orgánu.

#### Vysvětlení symbolů



Zdravotnický prostředek



Označuje, že produkt je v souladu s evropskou legislativou pro zdravotnické prostředky



Katalogové číslo



Datum použitelnosti (RRRR-MM-DD)



Kód šarže



Datum výroby (RRRR-MM-DD)



Výrobce



Přečtěte si návod k použití



Určeno na jedno použití



Označuje čárový kód, který obsahuje identifikaci speciálního zařízení



(Global Trade Item Number) Globální číslo obchodní položky



Uchovávat mimo sluneční záření



Neklopit



Recyklovatelný obal



Bezpečné při vyšetření MR