

(DK) Barriere: Beskytter hud udsat for tarmindehold, urin og pus. Lindrer allerede beskadiget hud. Vandskyende. pH 5.5. Cremen masseres grundigt ind i den rengjorte hud. Ved efterfølgende brug af hæftende bandage bør tyndt lag påføres - evt. overskydende creme fjernes med en blød serviet. Coloplast Danmark A/S, Møllevvej 11-15, 2990 Nivå, Denmark.


(FR) Crème Protectrice: Protège la peau des sécrétions intestinales, des l'urine, du pus. Calme l'irritation cutanée. Crème imperméable. pH 5.5. Faire pénétrer complètement la crème en massant. Si vous utilisez des poches adhésives, appliquez une très légère couche de crème et enlevez l'excédent de crème à l'aide d'une serviette douce avant de poser la poche. Distribué par : Coloplast s.a., 6 Rue de Rome, Z.A.C. de Nanteuil, 93110 Rosny-sous-Bois, France. Coloplast Belgium n.v., Humaniteitslaan 65, B-1601 Ruisbroek, Belgium.

(DE) Schutzcreme: Zum Schutz der Haut, die u.a. Darmausscheidungen, Urin oder Wundsekret ausgesetzt ist. Schonnt bereits irritierte Haut. Wasserabstoßend, pH-Wert 5.5. Die Creme intensiv in die gereinigte Haut einmassieren. Wird anschließend eine haftende Versorgung verwendet, sollte die Creme nur dünn aufgetragen werden.

Pos.-Nr. 29.26.10.0002 Coloplast Ges.m.b.H., Am Concorde Park 1/B1, AT-2320 Schwechat. Coloplast AG., Euro Business Center, Euro 1, Blegistrasse 1, CH-6343 Rotkreuz. Coloplast GmbH, Kuehnstrasse 75, DE-22045 Hamburg.

(CZ) Bariérový krém: Chrání kůži vystavenou kontaktu se střečními výměšky nebo s močí. Přináší úlevu podrážděné kůži, zvlhčuje suchou kůži. Odpuzuje vodu, pH 5,5. Potřete tenkou vrstvou krému kůži kolem stomie. Nechte působit a poté nadměrné množství krému z kůže setřete před nalepením další stomické pomůcky.

Coloplast a Comfeel jsou registrované obchodní známky společnosti Coloplast A/S.
©2010-01 Všechna práva vyhrazena. Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Denmark.

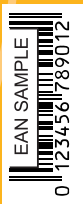

A10-894

Comfeel® Barrier Cream

Barriere

Crème Protectrice

Schutzcreme

Bariérový krém

Declaration/Složení:

water, mineral oil, petrolatum, ozokerite, glyceryl oleate, lanolin oil, propylene glycol, glycerin, magnesium citrate, methylparaben, propylparaben, citric acid, cyclomethicone

60 ml
4720



Coloplast

  Coloplast A/S
3050 Denmark

Data wazbiści



i numer serii



na spawie



EAN# 5-701780-492669